

Rotor Elektryczny

MOBIFIT

Ostrzeżenia

Jeżeli się używa urządzeń elektrycznych trzeba zachowywać środki ostrożności z tym związane
Należy przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

Zagrożenia

Żeby uniknąć ryzyka porażenia prądem, proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka po używaniu a także przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.

Ważne

W celu uniknięcia spalania, porażenia prądem i uszkodzenia osób:

1. Jak urządzenie jest nieużywane wtyczka ma być wyciągnięta z gniazdka.
2. Proszę nie zostawiać urządzenia włączonego kiedy jest nie używane lub w czasie wymiany części
3. Proszę nie okrywać kocem czy poduszką, ponieważ niepożądany wzrost ciepła może doprowadzić do porażenia prądem.
4. W czasie użytkowania przez dzieci, osoby chore lub niepełnosprawne, musi odbywać się to pod nadzorem opiekuna.
5. Stosowanie innych części dodatkowych niż dostarczanych przez producenta jest zabronione.
6. Urządzenie może być używane tylko po sprawdzeniu kabla i wtyczki, w razie uszkodzenia kabla (wpaść do wody bądź przetarty, należy skontaktować się z serwisem)
7. Przenoszenie urządzenia za kabel jest zabronione, kabel nie jest rączką służącą do tego.
8. Przewód ten proszę chronić przed płytami grzewczymi i grzejnikami
9. Nie można używać urządzenia kiedy otwory wentylacyjne są zasłonięte oraz należy unikać zanieczyszczeń (m.in. włosami)
10. Nie można go używać na zewnątrz oraz w pobliżu puszek ze sprayem bądź tlenem
11. Urządzenie wyłącza się przez wyłącznie przyciskiem i wyciągnięciem wtyczki z gniazdka
12. Proszę chronić dzieci, żeby znajdowały się z dala podczas pracy pedałów

Instrukcja obsługi:

1. Cztery zakresy szybkości: 30/40/50/60 obrotów na minutę
2. Zegar mierzenia czasu: Pięć ustawień: 3/6/9/12/15 minut
3. Możliwość ustawienia obrotów do przodu i do tyłu, przy przełączeniu należy odczekać 2 sekundy przed ponownym rozpoczęciem ćwiczeń.
4. Pokazuje liczbę obrotów.
5. Kalorie.
6. Automatyczne przełącza się na tryb normalny przy ustawieniu na „normal”
7. Sygnalizacja alarmowa: Jeżeli urządzenie będzie źle używane, silnik się automatycznie wyłączy i przechodzi w sygnał alarmowy. Należy wtedy nacisnąć jeszcze raz przycisk startu i zacząć normalnie używać. Jeżeli przez 1 minutę sygnał się będzie utrzymywać, urządzenie automatycznie się wyłączy.
8. Biodra i kolana w tym urządzeniu nie są obciążone.

Ostrzeżenia:

1. Jeżeli urządzenie nie jest używane należy je wyłączyć.
2. Nie moczyć urządzenia, a także nie przecierać mokrą ściereczką.
3. Nie można czyścić go chemicznymi środkami.
4. Jeżeli włączy się sygnał alarmowy nie używać i skontaktować się z serwisem.

Instrukcja używania

1. Włączyć 220V
2. Budowa pedału na nogi (rys. 1)
3. Budowa pedału na ręce (rys. 2)
4. Włączyć przycisk startu
5. Na wyświetlaczu może pojawić się: 4-8 cyfer
6. Ustawienie np. prędkość, czas, kierunek kręcenia,
7. Nacisnąć START/PAUZA i wtedy zaczyna pracować

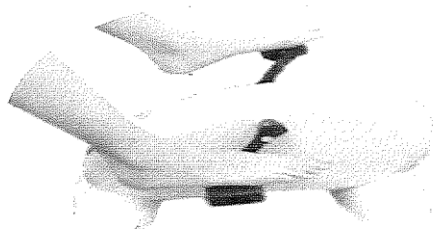


Bild 1



Bild 2

Przyciski pilota:

Start/pauza – 1 przyciśnięcie start, drugie przytrzymanie przez 2 sek. Zatrzymanie

Szybkość – można wybrać


Kierunek obrotu – 1 przyciśnięcie do przodu drugi do tyłu

Czas – wartości do wyboru

Automatic – automatycznie ustawia się zaprogramowany program



Modus – pokazuj liczbę obrotów, kalorii i metrów przejechanych

Sygnal w razie uszkodzeń

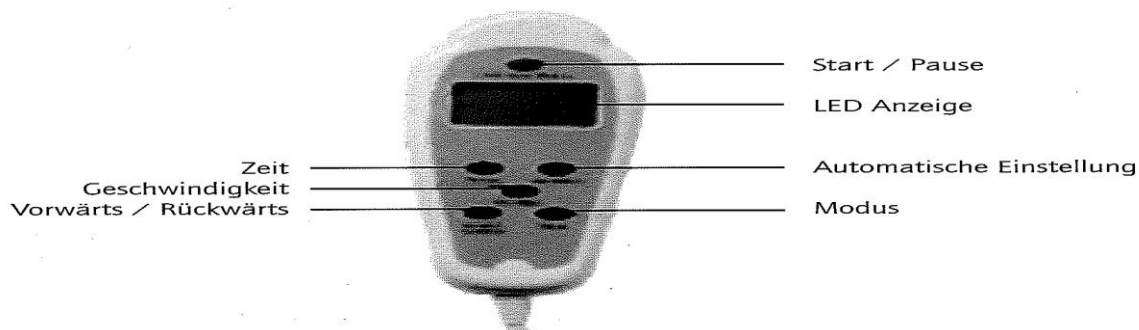

Wymiana pedałów

1. Przy wymianie części proszę wyłączyć go z prądu
2. Zmiana pedału na nogi (rys. 3)
3. Zmiana pedału na rękę (rys.4)

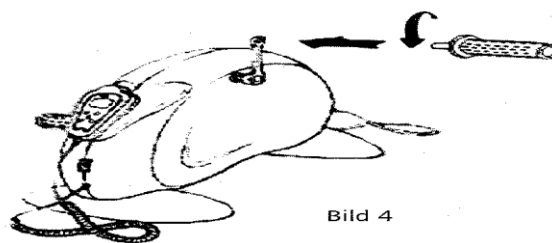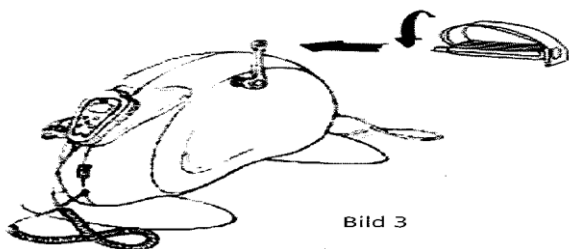

Ostrzeżenia

Wyposażone w urządzenie mogące obsługiwać je tylko przez wykwalifikowanych pracowników.

Przecierać suchą szmatką nie wkładać urządzenia do wody

Nie przeciągać urządzenia za kabel

Nie owijać kabla wokół urządzenia

Jeżeli urządzenie jest nie używane, wyłączyć z prądu postawić w suchym miejscu z daleka od dzieci i nie owijać kabla wokół urządzenia

Dodatkowe informacje:

Zasilanie: 220V-50 Hz

Osiągi: 20W

Motor: 220V-50 Hz

Waga: 5,7 kg

Średnie osiągi: 48 obrotów na minutę

Wymiary: 440x425x285 mm

Promień obrotu pedału: 105 mm

Pomiar czasu: 0-30 minut

